

Dosage spectrophotométrique d'une solution de KMnO_4





Solution étalon de KMnO_4 à 40mg.L^{-1}


Solution de KMnO_4 à doser



N° de tube de la gamme d'étalonnage	1	2	3	4	5
Volume de solution étalon de KMnO_4 à 40mg.L^{-1} (en mL)	0	1	2	3	4
Volume d'eau distillée (en mL)	4	3	2	1	0
Concentration Solution fille (en mg.L^{-1})					

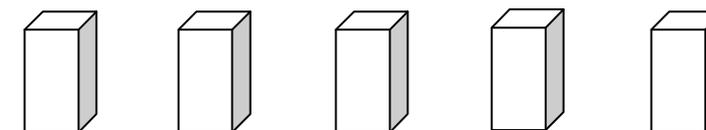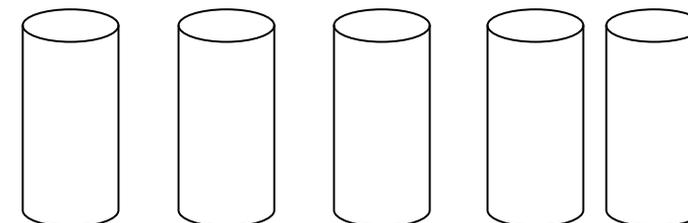

spectrophotomètre

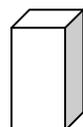

Absorbance à 540 nm
de la solution de
 KMnO_4 à doser :

N° de tube	1	2	3	4	5
Concentration en mg.L^{-1}					
Absorbance à 540 nm					

